

---

# Symposium interdisciplinaire allaitement 2023



Rendre l'allaitement possible



Stillförderung Schweiz  
Promotion allaitement maternel Suisse  
Promozione allattamento al seno Svizzera

**CHUV** Centre hospitalier  
universitaire vaudois

Dispositif d'Aide à  
la Lactation  
*Le « DAL »*



**Centre hospitalier  
universitaire vaudois**

Unité de soutien à l'allaitement de la Néonatalogie du CHUV

# Définition

Le DAL est un **systeme d'alimentation** au sein **avec une sonde** qui répond aux besoins **d'allaitement complexe** présent dans notre service.

(ex. insuffisance de lait maternel et succion trop faible du prématuré)

# Bénéfices

- Le bébé stimule la sécrétion lactée
  - Favorise la succion du nouveau-né
  - Evite le risque de confusion sein-tétine
  - Avantages émotionnels et affectifs
- Permet de faire la transition jusqu'au moment où l'enfant tétera correctement

# Indications

Nouveau-né  
pouvant recevoir  
une alimentation  
orale

Allaitement ET  
mise au sein  
souhaitée par la  
maman



## Contre- indications

- Toute contre-indication à une alimentation orale
- Allaitement SANS mise au sein
- Absence de succion active



## Risques

- Risques de fausses routes si le dispositif est placé trop haut

# Matériel

- Sonde gastrique n°5
- Biberon avec tétine



# Matériel / déroulement

1. Insérer la sonde gastrique n°5 dans un biberon et faire ressortir par la tétine, laisser le bouchon gris au fond du biberon (ne jamais couper la sonde).



# Matériel / déroulement

## 2. Positionner la sonde:

- De manière à ce qu'elle dépasse de 0,5 cm le mamelon
- Le but étant qu'elle arrive au niveau du palais de l'enfant pour faciliter son travail de « vide d'air »
- En laissant le nez du nouveau-né libre contre la peau de sa maman



# Matériel / déroulement


## 2. Positionner la sonde:



- De manière à ce qu'elle dépasse de 0,5 cm le mamelon
- Le but étant qu'elle arrive au niveau du palais de l'enfant pour faciliter son travail de « vide d'air »
- En laissant le nez du nouveau-né libre contre la peau de sa maman

# Matériel / déroulement

3. Scotcher la sonde avec du micropore après avoir demandé autorisation à la mère. (Etape non obligatoire, mais assure une meilleure stabilité pour l'autonomie de la mère).
4. Positionner l'enfant au sein
5. Placer la bouteille à hauteur adaptée à l'enfant:
  - Plus elle sera **haute** plus le lait coulera **vite**
  - Plus elle sera **basse** plus il sera **difficile** d'aspirer le lait

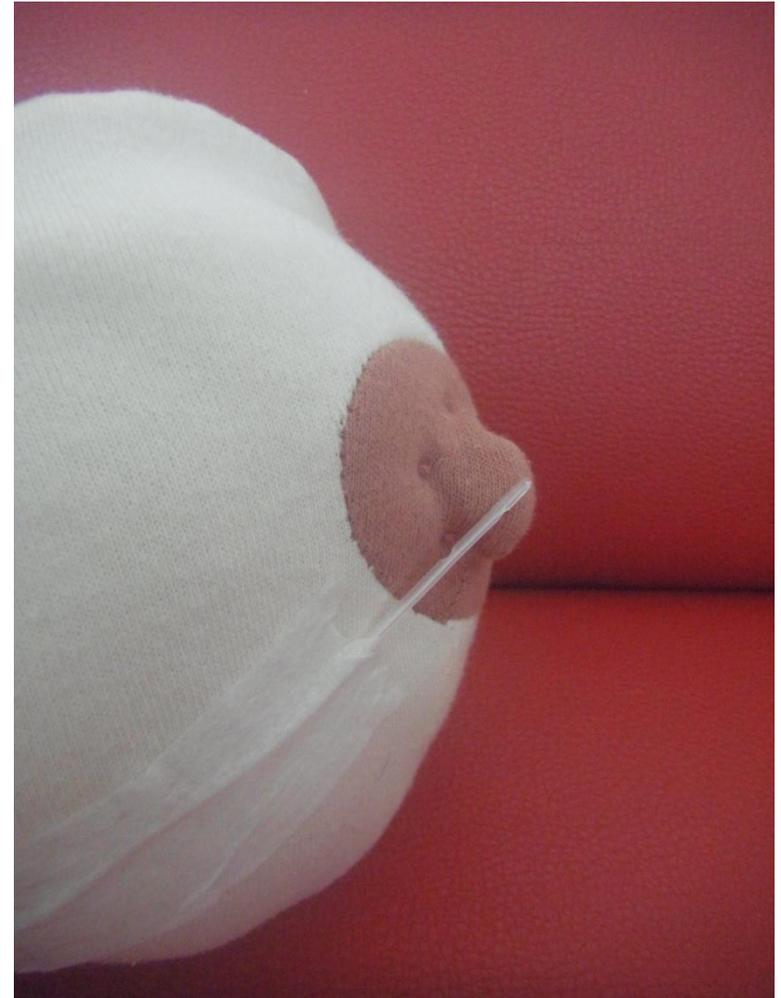

# Matériel / déroulement

Si utilisation d'une tétérelle



# Autonomie de la maman

- Quand le DAL requiert la surveillance d'une infirmière?
  - Lors des 1ères utilisation
  - Pendant l'installation
  - Lorsque les nouveaux-nés sont sous support respiratoire
  - Lors de fausses routes fréquentes
  - Lors de désaturations et/ou brady apnée pendant l'alimentation
- Quand laisser la maman seule?
  - Une fois le DAL mis en place
  - Présence d'une bonne succion du bébé
  - Une maman confortablement installée et à l'aise avec cette technique

**!/\ aux enfants « non-monitoré » pendant l'alimentation**


# LM au DAL ou LM biberon?

Au DAL...

- Parce que pour certaines mamans, l'allaitement ne se résume pas à donner son lait
- Parce que pour certaines mamans ayant eu un accouchement difficile l'allaitement au sein prendra toute son importance
- Parce que pour certaines mamans n'ayant pu vivre l'expérience de la grossesse (adoption par ex.) l'allaitement au sein complètera leur expérience de la maternité



# Ça ne date pas d'hier!

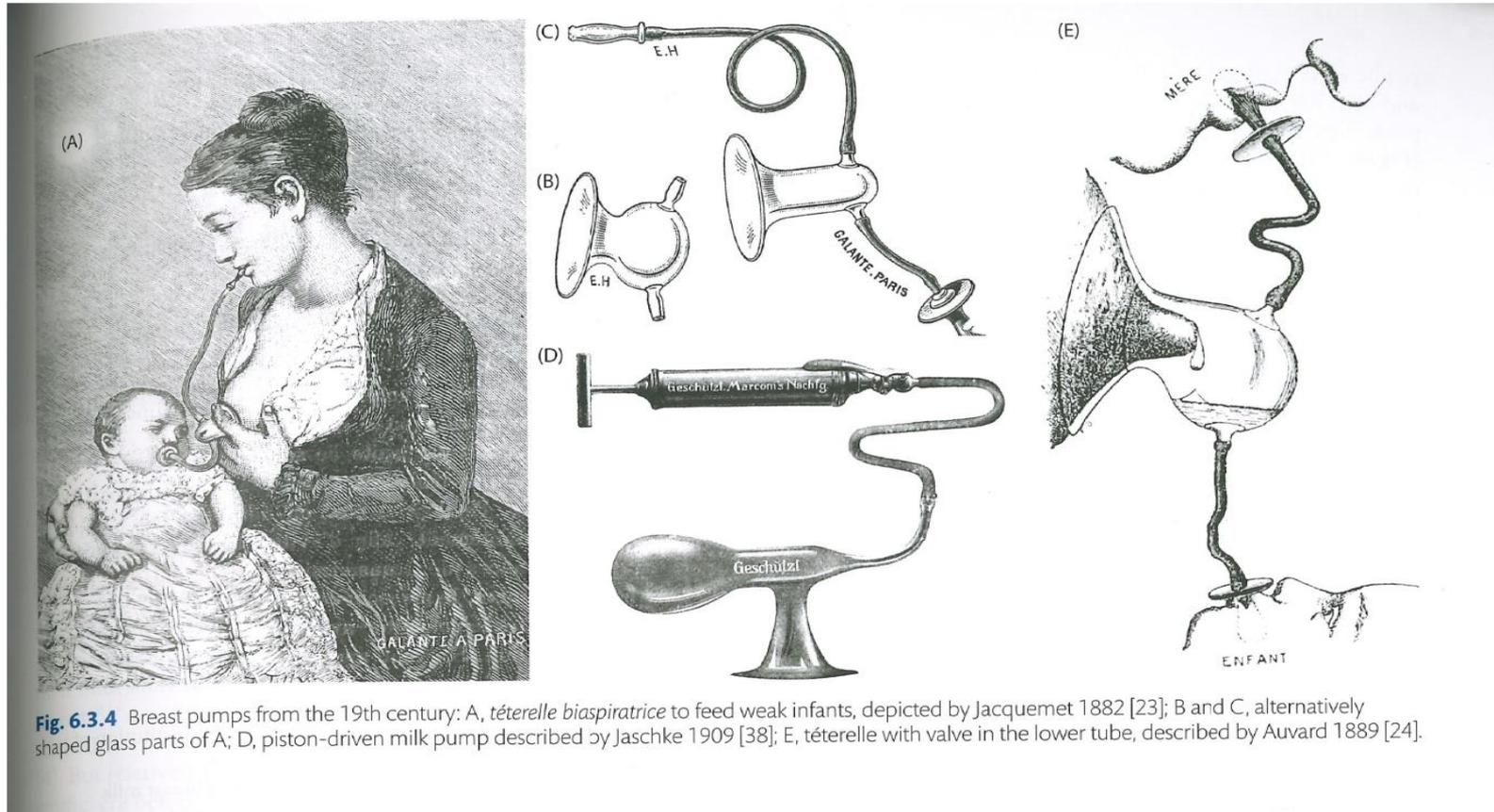


**Fig. 6.3.4** Breast pumps from the 19th century: A, *téterelle biinspiratrice* to feed weak infants, depicted by Jacquemet 1882 [23]; B and C, alternatively shaped glass parts of A; D, piston-driven milk pump described by Jaschke 1909 [38]; E, *téterelle* with valve in the lower tube, described by Auvard 1889 [24].

Obladen, M. (2021). Oxford Textbook of the Newborn: A Cultural and Medical History. Royaume-Uni: OUP Oxford.

# Vidéo

[https://player.vimeo.com/progressive\\_redirect/playback/799771417/rendition/1080p/file.mp4?loc=external&signature=2bafefb530502fc022524ced74deee58e01661689291b0d92519a1f1780daa3b](https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/799771417/rendition/1080p/file.mp4?loc=external&signature=2bafefb530502fc022524ced74deee58e01661689291b0d92519a1f1780daa3b)

[https://youtu.be/ezG1klkhC\\_o](https://youtu.be/ezG1klkhC_o)

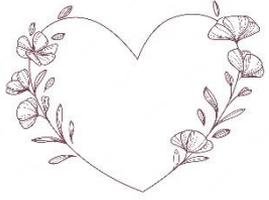

# Merci pour votre attention



Unité de soutien à l'allaitement de la Néonatalogie du CHUV